

Dentální kofferdam

SH-IFU-001_03
Návod k použití

SANCTUARY HEALTH SDN. BHD.

Určeno k použití:

Dentální kofferdamy jsou tenké plátky z latexového nebo bezlatexového materiálu používané jako zábrana při endodontických zákrocích.

U zařízení určených k použití společně:

Příslušenství Dentální kofferdam (Spony na kofferdam, perforační kleště, kleště na spony a rámeček na kofferdam)

Doba použití:

Je určen k nepřetržitému používání po dobu kratší než 60 minut během zubních úkonů.

Podmínky skladování:

Latexové a nelatexové dentální kofferdamy snadno stárnou a jejich uchování probíhá za velmi citlivých podmínek. Tento materiál může ovlivnit mnoho různých faktorů (hlavně teplota). Teplota skladování by neměla přesáhnout 40°C (104°F).

Záruční doba:

Dentální kofferdam by měl být použit před vypršením záruční doby, která je uvedena na obalu, jen tak se zaručí nejlepší použití. Záruka latexových dentálních kofferdamů je 5 let od data výroby, nelatexových kofferdamů 3 roky od data výroby. Doporučujeme zohlednit faktor skladování produktu, zajistí se tak zmíněná trvanlivost.

Popis produktu:**Popis produktu dentální kofferdam:**

Dentální kofferdam	Tloušťka	Barva	
Latexový	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Tenký	Zelená / Modrá
		Středný	
		Tlustý	
		Tenký	Černá
		Středný	
		Tlustý	
Tenký	Hedvábně Modrá		
Středný			
Bezlatexový	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Středný	Fialová
			Dva tóny modré

Základní principy fungování lékařských zařízení a jejich části

- (i) Umístěte dentální kofferdam na rovnou plochu.
- (ii) Určete postižený zub. Vyberte si správnou velikost otvoru pro disk u perforačních kleští a na hráz děrujte otvor o průměru přibližně 2 mm.
- (iii) Pomocí kleští na spony přidržte/zvětšete spony na kofferdam a umístěte kovovou sponu na kofferdam do vytvořené díry.
- (iv) Umístěte kofferdam se sponou na ošetřovaný zub.
- (v) Umístěte rámeček na kofferdam mimo ústa, čímž se zadrží nadbytek materiálu kofferdamu.

Varování/doporučení:

- Pouze jednorázové použití
- Doporučuje se pouze pro profesionální použití
- Tento produkt obsahuje přirozený gumový latex, který může vyvolat alergickou reakci (platí pouze pro latexové kofferdamy).

Varování:


- Epoužívejte výrobky, pokud jste našli nějaké díry nebo trhliny.
- Opětovné použití zařízení může vést k nákaze nebo infekci.

Likvidace zařízení:

Dodržujte platné místní postupy likvidace.

Poznámka pro uživatele a/nebo pacienta, že jakákoliv závažná událost, která se objevila v souvislosti se zařízením, by měla být oznámena výrobcí a kompetentní autoritě členského státu, ve kterém se uživatel a/nebo pacient nachází.

Vyrobil: Sanctuary Health Sdn. Bhd. No. 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, Malajsii. Tel: +605-201 2800 Fax: +605-201 7800 E-mail: info@sanctuaryhealth.com.my Web: http://sanctuary-dental.com/	Autorizovaný zástupce v Evropě: Sanctuary Health pověřil jako zástupce níže uvedenou firmu: Wellkang Ltd (trading/as Wellkang Tech Consulting) Suite B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, Spojené Království Tel: +44(20)30869438/32876300 Fax: +44(20)76811874 Web: www.CE-marking.eu www.CE-marking.com www.wellkang.com
--	--

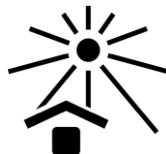

Wellkang Ltd
Suite B, 29 Harley Street
LONDON, W1G 9QR, U.K.
www.CE-Marking.EU

Vyrobeno v Malajsii