

Digues dentaires

SH-IFU-001_03

Instructions d'utilisation

SANCTUARY HEALTH SDN. BHD.

Usage prévu:

Les digues dentaires sont de fines couches avec ou sans latex, utilisées comme barrières pendant des procédures endodontiques.

Pour des dispositifs à usages simultanés:

Les accessoires pour digues dentaires (les crampons, les pinces, les davières et les cadres)

Durée d'utilisation:

Elle est conçue pour un usage continu de moins de 60 minutes lors des interventions.

Conditions de conservation:

Les digues dentaires avec et sans latex vieillissent facilement, et les conditions de conservation du produit sont très délicates. De nombreux facteurs (surtout la température) peuvent endommager la matière. Ainsi, la température de conservation devrait être inférieure à 40 °C (104 °F).

Période de garantie:

Afin d'en faire le meilleur usage, la digue dentaire devra servir avant la date d'expiration inscrite sur la boîte colorée. La date d'expiration de la digue avec latex est de 5 ans à compter de la date de fabrication, tandis que pour la digue sans latex, elle est de 3 ans à compter de la date de fabrication. La prise en compte du stockage du produit à la condition recommandée doit être pratiquée pour assurer la durée de conservation mentionnée.

Caractéristiques du produit:**Caractéristiques de la digue dentaire:**

Digues dentaires	Dimension		Couleur
Latex	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Fine	Vert / Bleu
		Moyene	
		Épaisse	
		Fine	Noir
		Moyene	
		Épaisse	
Fine	Bleu de soie		
Moyene			
Sans latex	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Moyene	Pourpre
			Bleu à 2 tons

Principes de base pour le fonctionnement du dispositif médical et caractéristiques

- (i) Placez la digue dentaire sur une surface plate.
- (ii) Repérez la dent affectée. Choisissez la bonne taille du trou du disque au niveau des pinces et faites un trou d'environ 2 mm de diamètre sur la digue.
- (iii) Utilisez un davier pour tenir / agrandir les crampons et placez les crampons en métal sur le trou formé.
- (iv) Placez la digue avec des crampons sur la dent affectée.
- (v) Placez les cadres à digue en dehors de la bouche pour contenir les excès de digue.

Précautions / recommandations:

- Utilisez une seule fois
- Usage exclusivement professionnel
- Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques (il n'est applicable que pour des digues dentaires en latex).

Mise en garde:

N'utilisez pas le produit au cas où vous trouvez un orifice ou un signe d'usure.


La réutilisation du dispositif peut causer une contamination ou une infection croisée.

Mise au rebut des appareils:

Suivre la procédure de mise au rebut locale selon les installations de l'utilisateur.

L'utilisateur ou le patient doit rapporter tout incident survenu lors de l'utilisation au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre au sein duquel l'utilisateur ou le patient est établi.

Fabriqué par: Sanctuary Health Sdn. Bhd. No. 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, Malaisie. Tel: +605-201 2800 Fax: +605-201 7800 E-mail: info@sanctuaryhealth.com.my Web: http://sanctuary-dental.com/	Représentant européen autorisé: Sanctuary Health nommé le R.E.A ci-après: Wellkang Ltd (trading/as Wellkang Tech Consulting) Suite B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, United Kingdom Tel: +44(20)30869438/32876300 Fax: +44(20)76811874 Web: www.CE-marking.eu www.CE-marking.com www.wellkang.com
---	--

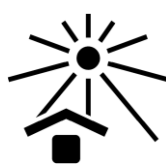

Wellkang Ltd

Suite B, 29 Harley Street
LONDON, W1G 9QR, U.K.
www.CE-Marking.EU

Fabriqué en Malaisie