

Kofferdam

SH-IFU-001_03
Gebrauchsanweisung

SANCTUARY HEALTH SDN. BHD.

Verwendungsbereich:

Kofferdams sind dünne Latex- oder Nicht-Latexfolien, die bei endodontischen Eingriffen als Barriere verwendet werden.

Für Geräte, die zusammen verwendet werden sollen:

Kofferdam Zubehör (Kofferdamklammer, Kofferdam-Lochzange, Kofferdamklammerzangen und Kofferdamrahmen)

Haltbarkeit:

Es ist für einen Dauereinsatz von weniger als 60 Minuten bei zahnärztlichen Eingriffen vorgesehen.

Lagerbedingungen:

Latex-Kofferdam und Nicht-Latex-Kofferdam sind leicht zu altern und die Lagerbedingungen dieses Produkts sind sehr empfindlich. Viele variable Faktoren (insbesondere die Temperatur) können dieses Material beeinflussen. Daher muss die Lagertemperatur unter 40° C (104° F) liegen.

Garantiezeit:

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte Kofferdam vor dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwendet werden. Die Haltbarkeit von Latex-Kofferdam beträgt 5 Jahre ab Herstellungsdatum, während die Haltbarkeit von Nicht-Latex-Kofferdam 3 Jahre ab Herstellungsdatum beträgt. Es ist zu berücksichtigen, dass das Produkt unter den empfohlenen Bedingungen gelagert werden muss, um die angegebene Haltbarkeit zu gewährleisten.

Produktspezifikation:**Produktspezifikation des Kofferdams:**

Kofferdam	Größe	Farbe
Latex	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Dünn
		Mittel
		Dick
	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Dünn
		Mittel
		Dick
	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Dünn
		Mittel
Nicht-Latex	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Mittel
		Mittel

Die grundlegenden Funktionsprinzipien und Funktionen dieses Medizinproduktes

- (i) Platzieren Sie den Kofferdam auf einer Fläche.
- (ii) Bestimmen Sie den betroffenen Zahn. Wählen Sie die richtige Größe des Scheibenlochs am Kofferdam Lochzange und stanzen Sie ein Loch von ca. 2 mm Durchmesser in den Damm.
- (iii) Verwenden Sie ein Kofferdam-Klammerzangen, um die Kofferdam-Klammern zu halten / zu vergrößern, und setzen Sie die Metallklammern in das Loch.
- (iv) Platzieren Sie den Damm mit Kofferdam-Klammern auf dem betroffenen Zahn.
- (v) Platzieren Sie den Rubberdam Rahmen außerhalb des Mundes, um überschüssige Dammaterial zu halten.

Vorsichtsmaßnahmen/ Empfehlungen:

- Nur einmal verwenden
- Nur für professionelle Anwendung
- Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, die allergische reaktionen verursachen können (Es gilt nur für Latex-Kofferdam)

Warnungen:

Verwenden Sie keine Produkte, wenn Sie irgendwelche Löcher oder Zerreißen gefunden.


Die Wiederverwendung des Produktes kann zu Kreuzkontaminationen oder Kreuzinfektion führen.

Entsorgung der Geräte:

Befolgen Sie die örtlichen Entsorgungsverfahren entsprechend der Ausrüstung des Benutzers.

Eine Mitteilung an den Benutzer und/ oder Patienten über schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Staats zu melden, in dem sich der Benutzer und/ oder Patienten befinden.

Hersteller: Sanctuary Health Sdn. Bhd. No. 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, Malaysia. Tel: +605-201 2800 Fax: +605-201 7800 E-mail: info@sanctuaryhealth.com.my Web: http://sanctuary-dental.com/	Vertreter in Europa: Sanctuary Health hat unten einen Vertreter in Europa ernannt: Wellkang Ltd (trading/as Wellkang Tech Consulting) Suite B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, United Kingdom. Tel: +44(20)30869438/32876300 Fax: +44(20)76811874 Web: www.CE-marking.eu www.CE-marking.com www.wellkang.com
---	---

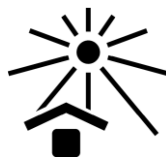

Wellkang Ltd
Suite B, 29 Harley Street
LONDON, W1G 9QR, U.K.
www.CE-Marking.EU

Hergestellt in Malaysia