

Koferdamo guma

SH-IFU-001_03 **Naudojimo instrukcijos**

SANCTUARY HEALTH SDN. BHD.

Numatytoji paskirtis:

Koferdamo guma yra ploni latekso arba ne latekso lakštai, kurie naudojami kaip barjeras endodontijos procedūrų metu.

Prietaisams, kurie numatomi naudoti kartu:

Koferdamo gumos priedai (koferdamo žiedas, koferdamo skylmušys, koferdamo žnyplės ir koferdamo rėmeliai)

Naudojimo trukmė:

Jis skirtas odontologinių procedūrų metu nepertraukiamai naudoti mažiau nei 60 minučių.

Laikymo sąlygos:

Iš latekso ar ne iš latekso pagaminta koferdamo guma greitai sensta, o produkto konservavimo sąlygos yra labai jautrius. Šią medžiagą gali paveikti daug kintamų veiksnių (ypač temperatūra). Todėl laikymo temperatūra turi būti žemesnė nei 40 °C (104 °F).

Garantijos periodas:

Norint pasiekti geriausią naudojimo poveikį, koferdamo guma turi būti sunaudota iki tinkamumo laiko pabaigos, kuri nurodyta ant spalvotos dėžutės. Lateksinės koferdamo gumos galiojimo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos, o ne lateksinės koferdamo gumos – 3 metai nuo pagaminimo datos. Norint užtikrinti aukščiau paminėtą laikymo laikotarpį, būtina laikyti gaminį rekomenduojamomis sąlygomis.

Produkto specifikacija:**Koferdamo gumos produkto specifikacijos:**

Koferdamo gumos	Matmenys		Spalva
Latekso	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Plona	Žalia/ Mėlyna
		Vidutinė	
		Stora	
	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Plona	Juoda
		Vidutinė	
		Stora	
127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Plona	Šilko mėlyna	
	Vidutinė		
Ne latekso	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Vidutinė	Violetinė
			Dviejų tonų mėlyna

Pagrindiniai medicinos prietaisų veikimo principai ir jų ypatybės

- (i) Koferdamo guma padėkite ant plokščio paviršiaus.
- (ii) Nustatykite paveiktą dantį. Pasirinkite koferdamo skylmušį su tinkamo dydžio išmušama skylė ir išmuškite maždaug 2mm skersmens skylę ant gumos.
- (iii) Žiedui laikyti / padidinti naudokite žnyplės ir į iškirstą skylę įdėkite metalinį žiedą.
- (iv) Ant pažeisto danties uždėkite koferdamo gumą su žiedu.
- (v) Uždėkite koferdamo rėmelį už burnos ribų, kad prilaikytumėte perteklinę gumos medžiagą vietoje.

Atsargumo priemonės / rekomendacijos:

- Tik vienkartiniam naudojimui
- Rekomenduojama naudoti tik profesionalams
- Šio produkto sudėtyje yra natūralaus kaučiuko latekso, kuris gali sukelti alergines reakcijas (taikoma tik lateksiniai koferdamo gumai).

Įspėjimas:

Jei yra bet kokių skylių ar įplyšimų, produktų nenaudokite.


Pakartotinis prietaiso naudojimas gali sukelti kryžminį užteršimą ir kryžminę infekciją.

Prietaisų utilizavimas:

Laikykites vietinių atliekų šalinimo procedūrų, kaip numatyta kiekvienoje įmonėje.

Pranešimas vartotojui ir (arba) pacientui, kad apie visus rimtus su prietaisu susijusius įvykius turėtų būti pranešama gamintojui ir valstybės narės, kurioje įsikūręs vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Pagamino: Sanctuary Health Sdn. Bhd. No. 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, Malaizija. Tel: +605-201 2800 Faksas: +605-201 7800 El. paštas: info@sanctuaryhealth.com.my Svetainė: http://sanctuary-dental.com/	Įgaliotas atstovas Europoje: „Sanctuary Health“ paskyrė toliau nurodytą įgaliotą atstovą Europoje: Wellkang Ltd (prekyba vykdoma „Wellkang Tech Consulting“ vardu) Suite B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, Jungtinė Karalystė Tel: +44(20)30869438/32876300 Faksas: +44(20)76811874 Svetainė: www.CE-marking.eu www.CE-marking.com www.wellkang.com
--	--

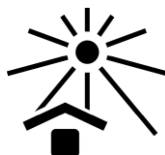

Wellkang Ltd

Suite B, 29 Harley Street
LONDON, W1G 9QR, U.K.
www.CE-Marking.EU

Pagaminta Malaizijoje