

Koferdam stomatologiczne

SH-IFU-001_03 **Instrukcja użytkowania**

SANCTUARY HEALTH SDN. BHD.

Przeznaczenie:

Koferdam stomatologiczny to cienki arkusz lateksu lub innego materiału, stosowane jako bariera podczas procedur leczenia endodontycznego.

W przypadku urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku:

Akcesoria do koferdamu stomatologicznego (klamry koferdamu, dziurkacz koferdamu, kleszcze koferdamu i ramki koferdamu)

Czas użytkowania:

Przeznaczone do ciągłego użytkowania przez mniej niż 60 minut podczas zabiegów dentystycznych.

Warunki przechowywania:

Lateksowe i bezlateksowe koferdamy stomatologiczne ulegają starzeniu, na które znaczny wpływ ma sposób przechowywania produktu. Na materiał wpływa wiele czynników, w szczególności temperatura. Z tego względu temperatura przechowywania powinna wynosić poniżej 40°C (104°F).

Okres gwarancji:

Aby osiągnąć najlepszy efekt użytkowania, koferdamu stomatologicznego należy użyć przed upływem terminu ważności podanego na kolorowym pudełku. Termin ważności koferdamów lateksowych upływa po 5 latach od daty produkcji, natomiast termin ważności koferdamów bezlateksowych upływa po 3 latach od daty produkcji. W celu zapewnienia wymienionego okresu trwałości produkty należy przechowywać w zalecanych warunkach.

Specyfikacja produktu:**Specyfikacje koferdamów stomatologicznych:**

Koferdam stomatologiczne	Grubości	Kolor	
Lateksowe	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Cienki	Zielony / Niebieski
		Średni	
		Gruby	
	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Cienki	Czarny
		Średni	
		Gruby	
127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Cienki	Jedwabisty niebieski	
	Średni		
Bezlateksowe	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Średni	Fioletowy
		Średni	Dwuodcieniowy niebieski

Podstawowe zasady stosowania i cechy urządzenia medycznego

- (i) Umieść koferdam na płaskiej powierzchni.
- (ii) Wyznacz ząb do leczenia. Wybierz odpowiedni rozmiar otworu tarczy na dziurkaczu i zrób otwór o średnicy około 2 mm w koferdamie.
- (iii) Użyj kleszczy, aby przytrzymał/powiększył kłamrę i umieść metalową kłamrę w zrobionym otworze.
- (iv) Umieść koferdam z kłamrą na zębie.
- (v) Umieść ramkę koferdamu stomatologicznego na zewnątrz ust, aby przytrzymał materiał koferdamu.

Uwaga / zalecenia:

- Jednorazowego użytku
- Zalecane tylko do użytku profesjonalnego
- Ten produkt zawiera lateks z kauczuku naturalnego, który może powodować reakcje alergiczne (dotyczy to tylko koferdamu lateksowego).

Ostrzeżenie:

Nie używaj produktów w przypadku znalezienia otworów lub rozdard.


Ponowne użycie urządzenia może prowadzić do zanieczyszczenia krzyżowego lub zakażenia krzyżowego.

Utylizacja urządzeń:

Postępuj zgodnie z lokalną procedurą utylizacji stosowaną w placówce..

Użytkownik i/lub pacjent powinien zgłaszać wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają siedzibę.

Wyprodukowane przez: Sanctuary Health Sdn. Bhd. No. 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, Malezji. Tel: +605-201 2800 Fax: +605-201 7800 E-mail: info@sanctuaryhealth.com.my Web: http://sanctuary-dental.com/	Autoryzowany Przedstawiciel w Europie: Wyznaczony przedstawiciel europejski Sanctuary Health: Wellkang Ltd (nazwa rynkowa Wellkang Tech Consulting) Suite B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, Wielka Brytania Tel: +44(20)30869438/32876300 Fax: +44(20)76811874 Web: www.CE-marking.eu www.CE-marking.com www.wellkang.com
---	--

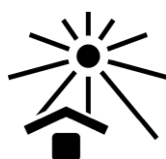

Wellkang Ltd

Suite B, 29 Harley Street
LONDON, W1G 9QR, U.K.
www.CE-Marking.EU

Wyprodukowano w Malezji