

Diques de goma

SH-IFU-001_03 **Instrucciones de uso**

SANCTUARY HEALTH SDN. BHD.

Uso previsto:

Diques de goma son hojas delgadas de látex o sin látex utilizados como una barrera durante los procedimientos de endodoncia.

Para dispositivos destinados a usarse juntos:

Accesorios de los diques dentales (Abrazaderas del diques dental, perforador del dique dental, Dental Presa Fórceps y marcos de dique dental)

Duración de su uso:

Está diseñada para un uso continuo durante menos de 60 minutos durante procedimientos dentales.

Condiciones de almacenamiento:

El dique de goma de látex y el dique de goma sin látex son fáciles de envejecer y la condición de conservación del producto es muy sensible. Muchos factores variables (especialmente la temperatura) pueden afectar este material. Por lo tanto, la temperatura de almacenamiento debe ser inferior a 40°C (104°F).

Periodo de garantía:

Para conseguir el mayor efecto durante su uso, se debe usar el dique dental antes de la fecha de caducidad que aparece en la caja de colores. La caducidad de los diques dentales de látex es de 5 años desde la fecha de fabricación, mientras la que los diques dentales sin látex es de 3 años desde la fecha de fabricación. Se debe practicar la consideración del almacenamiento del producto en las condiciones recomendadas para asegurar la vida útil antes mencionada.

Especificaciones del producto:**Especificaciones del producto de Presas Dentales:**

Diques de goma	Dimensiones	Color
Látex	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Delgado
		Medio
		Pesado
		Delgado
		Medio
		Pesado
		Delgado
		Medio
Sin látex	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Medio

Principios básicos con los que funcionan los dispositivos médicos y sus características

- (i) Coloque el dique dental sobre una superficie plana.
- (ii) Determine el diente afectado. Elija el tamaño correcto del orificio del disco en el punzón y perforo un orificio de aproximadamente 2 mm de diámetro en la presa.
- (iii) Use unas pinzas para sostener / agrandar la abrazadera y colocar la abrazadera metálica en el orificio perforado.
- (iv) Coloque la presa con una abrazadera en el diente afectado.
- (v) Coloque los Marcos del dique dental fuera de la boca para sujetar el exceso de material del dique.

Precaución/ Recomendaciones:

- Únicamente para un solo uso
- Recomendado únicamente para su uso profesional
- Este producto contiene látex de goma natural que puede provocar reacciones alérgicas (solo es aplicable al dique de látex).

Advertencia:

No utilice los productos si encontró agujeros o rasgaduras.


La reutilización del dispositivo puede provocar una contaminación cruzada o una infección cruzada.

Eliminación de los dispositivos:

Siga el procedimiento de eliminación local según las instalaciones del usuario.

Un aviso al usuario y / o paciente de que cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe informarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido el usuario y / o paciente.

Fabricado por: Sanctuary Health Sdn. Bhd. No. 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, Malasia. Tel: +605-201 2800 Fax: +605-201 7800 Correoelectrónico: info@sanctuaryhealth.com.my Web: http://sanctuary-dental.com/	Representante Europeo Autorizado: SanctuaryHealth ha nombrado al R.E.A. que aparece debajo: Wellkang Ltd (trading/as Wellkang Tech Consulting) Suite B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, Reino Unido Tel: +44(20)30869438/32876300 Fax: +44(20)76811874 Web: www.CE-marking.eu www.CE-marking.com www.wellkang.com
--	--

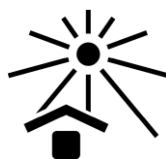

Wellkang Ltd
Suite B, 29 Harley Street
LONDON, W1G 9QR, U.K.
www.CE-Marking.EU

Fabricado en Malasia