

Dental Dam

SH-IFU-001_03
Bruksanvisning

SANCTUARY HEALTH SDN. BHD.

Avsedd användning:

Dental Dam är tunna ark av latex eller icke-latex som används som en barriär under endodontiska procedurer.

För enheter avsedda att användas tillsammans:

Dental Dams Tillbehör (Dental Dam Klämma, Dental Dam Håltång, Dental Dam Klammertång, Kofferdamhållare)

Användningstid:

Den är avsett för kontinuerlig användning under mindre än 60 minuter under ett Tandgrepp.

Lagringsförhållanden:

Latex Dental Dam och non-latex Dental Dam åldras lätt och villkoren för lagring av produkten är mycket känsliga. Många variabla faktorer (särskilt temperatur) kan påverka detta material. Därför bör lagringstemperaturen vara under 40°C (104°F).

Garantiperiod:

För att uppnå den bästa användningseffekten bör Dental Dam användas före utgångsdatumet som anges på den färgade lådan. Utgångsdatum för latex-Dental Dam är 5 år från tillverkningsdatumet medan för icke-Dental Dam är det tre år från tillverkningsdatumet. Hänsyn till produktlagring vid rekommenderat tillstånd ska tillämpas för att säkerställa ovan nämnda hållbarhetstid.

Produktspecifikation:**Dental Dams Produktspecifikationer:**

Dental Dams	Dimension	Färg
Latex	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Tunn
		Medel
		Tjock
		Tunn
		Medel
		Tjock
		Tunn
Icke-Latex	127mm x 127mm (5" x 5") 152mm x 152mm (6" x 6")	Medel
		Medel

Grundläggande principer för hur medicinsk utrustning fungerar och deras funktioner

- (i) Placera Dental Dam på en plan yta.
- (ii) Bestäm den drabbade tanden. Välj rätt storlek på skivhålet vid stansen och slå ett hål med en diameter på cirka 2 mm på dental dam.
- (iii) Använd en klammertång för att hålla / förstora klämman och placera metallklämman till det stansade hålet.
- (iv) Placera dammen med klämman på den drabbade tanden.
- (v) Placera Dental Dam ramen utanför munnen för att hålla bort överflödigt Dental Dam material.

Varning / rekommendationer:

- Endast engångsbruk
- Rekommenderas endast för professionellt bruk
- Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner (det är bara tillämplig för latex Dental Dam).

Varning:

Använd inte produkterna om du hittade hål eller revor.



Återanvändning av anordningen kan leda till korskontaminering eller korsinfektion.

Avfallshantering för anordningarna:

Följ lokal avfallshantering enligt platsens instruktioner.

Obs: Användaren och / eller patienten ska rapportera till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och / eller patienten är etablerad om alla allvarliga händelser som inträffat i samband med användning av enheten.

Tillverkad av: Sanctuary Health Sdn. Bhd. No. 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, Malaysia. Tel: +605-201 2800 Fax: +605-201 7800 E-post: info@sanctuaryhealth.com.my Webb: http://sanctuary-dental.com/	Auktoriserad representant i Europa: Sanctuary Health har utnämnt nedanstående E.A.R: Wellkang Ltd (trading/as Wellkang Tech Consulting) Suite B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, Storbritannien Tel: +44(20)30869438/32876300 Fax: +44(20)76811874 Webb: www.CE-marking.eu www.CE-marking.com www.wellkang.com
---	--

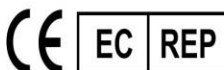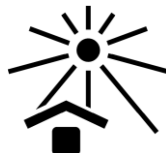

Wellkang Ltd
Suite B, 29 Harley Street
LONDON, W1G 9QR, U.K.
www.CE-Marking.EU

Tillverkad i Malaysia